



پشتی ماساژ شیاتسو مدل M12950

راهنمای استفاده

فهرست

۳	نکات ایمنی.....
۵	پیکربندی محصول.....
۶	نمودار صفحه کنترل.....
۷	راهنمای راه اندازی محصول.....
۹	عیب یابی.....
۱۰	مراقبت و نگهداری.....
۱۱	ویژگی های محصول.....

نکات ایمنی

۱. محیط استفاده

- پستی ماساژ را در شرایط مرطوب و محیط پردود استفاده نکنید چرا که ممکن است باعث اشکال در عملکرد یا برق گرفتگی شود.
- دستگاه را در حمام استفاده نکنید.
- آن را در جایی که امکان افتادن در وان یا سینک است، نگهداری نکنید.
- آن را در جای ایمن قرار دهید.
- در حین رانندگی از ماساژور استفاده نکنید.
- دستگاه را نزدیک بخاری یا در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.

۲. نامناسب برای افراد:

- اگر دارای هر یک از شرایط جسمانی زیر هستید، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید:
- بیماری‌های قلبی
- بارداری
- هر نگرانی پزشکی

۳. مواقعی که نباید از محصول استفاده شود

- اگر در یک نوبت بیش‌تر از ۱۵ دقیقه استفاده شد.
- کودکان تنها با نظارت بزرگسالان باید از دستگاه استفاده کنند.
- قبل از خواب
- اگر پارچه آن پاره شده است.
- اگر مایعات به داخل آن نفوذ کرده است.
- اگر مصرف‌کننده در حین استفاده شاهد اشکال در عملکرد یا شرایطی غیرعادی دیگر بود.
- هنگام رعد و برق

۴. توجه

- لطفاً نکات ایمنی را قبل از استفاده به دقت بخوانید تا از ایمنی و استفاده صحیح از آن اطمینان حاصل شود.

- این دستگاه برای استفاده افرادی که (شامل کودکان) با کاهش توانایی های فیزیکی، حسی و ذهنی رو به رو هستند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است مگر با نظارت و راهنمایی افرادی که مسئول سلامت آنها می باشند.
- استفاده طولانی از ماساژور می تواند باعث بیش از حد گرم شدن و کاهش طول عمر آن شود. در چنین مواقعی، از استفاده دست بکشید و اجازه دهید تا برای استفاده مجدد خنک شود.
- بعضی از صداها در حین ماساژ بخاطر لرزش عادی هستند.
- اگر فرد مصرف کننده تحت معالجه پزشکی است یا شرایط جسمی خاصی دارد با پزشک خود مشورت کند. لطفاً اگر احساس سلامتی نمی کنید از ماساژور استفاده نکنید.
- لطفاً اگر ماساژور در حال کار در محیطی سرد است، دمای محیط را به یکباره گرم نکنید. توصیه می شود دما را به تدریج بالا ببرید تا به دمای عادی برسد.
- اگر ماساژور در محیطی سرد یا محیطی گرم نگهداری می شود، لطفاً قبل از استفاده یک ساعت منتظر بمانید تا به ماساژدهی مطلوب برسید.
- لطفاً پوشش ماساژور را جدا نکنید. دست زدن به قطعات داخلی می تواند باعث برق گرفتگی یا مشکل در کارکرد دستگاه شود.
- سیم برق را با دست خیس به پریز وارد یا از آن خارج نکنید.
- اگر فشار برق کم است از ماساژور استفاده نکنید.

پیکربندی محصول

۱ سری ماساژ شانه


۲ سری ماساژ پشت

۳ کوسن نشیمنگاه


۴ صفحه کنترل

۵ محفظه صفحه کنترل

۶ دو شاخه و سیم برق

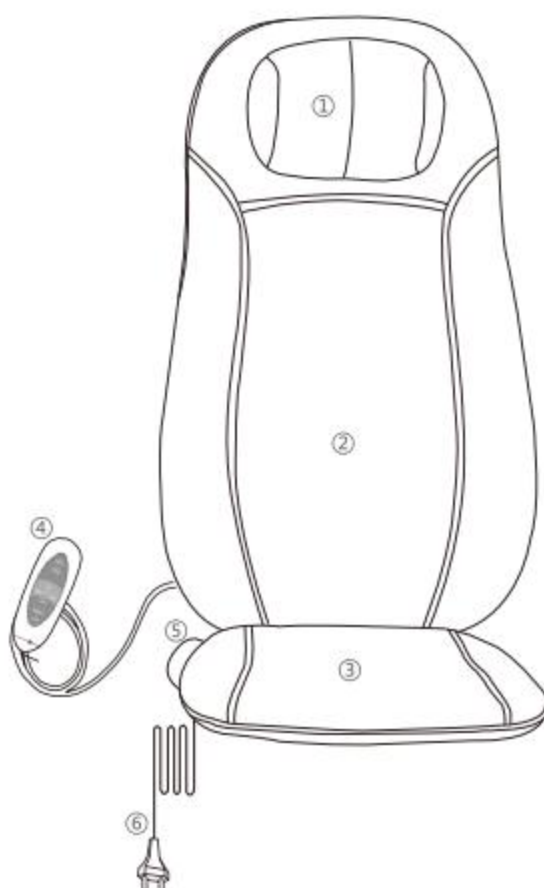

نمودار صفحه کنترل

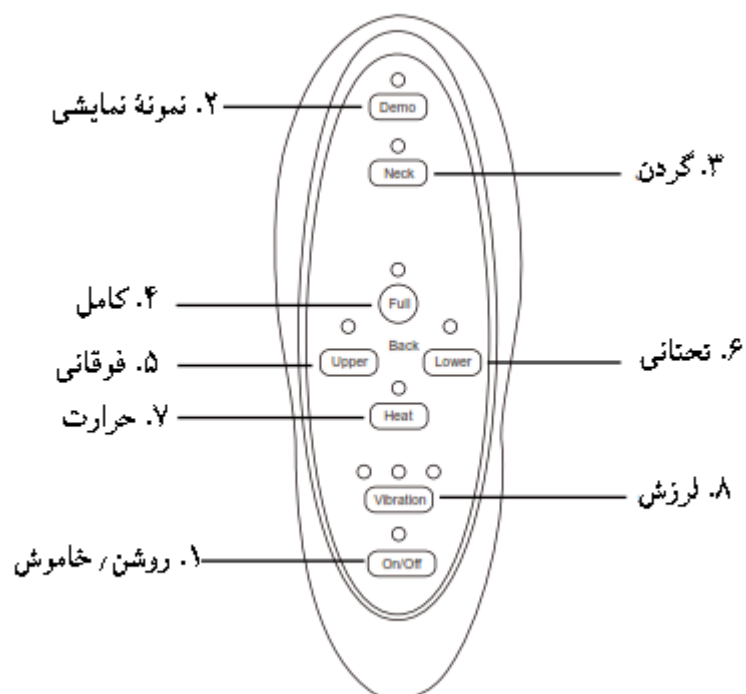

راهنمای راه اندازی محصول

آماده سازی قبل از استفاده

- ماساژور را روی صندلی یا مبل پشتی دار قرار دهید.
- دو شاخه اصلی را به پریز بزنید.
- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و ماساژ دلخواه را انتخاب کنید.

۱. روشن/خاموش (on/off)

دکمه on / off را فشار دهید، ماساژور در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد و نورهای نشانگر روشن می‌شود. اگر دکمه دیگری فشرده نشود دستگاه به طور خودکار بعد از ۱۵ دقیقه خاموش می‌شود.

۲. نمونه نمایشی (Demo)

دکمه Demo را بفشارید. دستگاه به طور خودکار عملکردهای متفاوتی از ماساژ را اجرا می‌کند. چراغ‌ها، مکان ناحیه ماساژ جاری را نشان می‌دهند. زمانی که تمام عملکردها اجرا شد ماساژور خاموش خواهد شد.

۳. گردن (neck)

با فشردن دکمه خاموش/روشن ماساژور را روشن کنید. دکمه neck را یکبار فشار دهید. سری ماساژ چپ به صورت پادساعتگرد و سری ماساژ راست به صورت ساعتگرد شروع به مالش می‌کنند. با فشار دوباره این دکمه، سری ماساژ چپ در جهت ساعتگرد و سری ماساژ راست در جهت پادساعتگرد شروع به مالش می‌کنند. با فشار سوم ماساژ متوقف می‌شود.

۴. کامل (full)

سری‌های ماساژ شیاتسو از حالت «پارک» در پایه پشتی ماساژور تا به بالا در ناحیه شانه حرکت می‌کنند و پشت بدن را همزمان به صورت مدور ماساژ می‌دهند. زمانی که به قسمت فوقانی رسیدند جهت چرخش سری‌های ماساژ معکوس می‌شود. سپس سری‌ها به سمت پایین به پایه پشتی ماساژور حرکت می‌کنند. زمانی که سری‌ها به آن نقطه رسیدند جهت چرخش سری‌های ماساژ دوباره معکوس می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کنند.

۵. فوقانی (upper)

سری‌های ماساژ شیاتسو نیمه فوقانی پشت را در حرکتی دورانی طی می‌کنند. جهت چرخش سری‌ها زمانی که به وضعیت انتهایی نسبی رسیدند، معکوس می‌شوند.

۶. تحتانی (lower)

سری‌های ماساژ شیاتسو نیمه تحتانی پشت را در حرکتی دورانی طی می‌کنند. جهت چرخش سری‌ها زمانی که به وضعیت انتهایی نسبی رسیدند، معکوس می‌شوند.

۷. لرزش (vibration)

دکمه vibration را فشار دهید. چراغ سمت چپ بالای دکمه روشن و لرزش با ماساژی آهسته فعال می‌شود. دکمه را دوباره فشار دهید تا درجه لرزش افزایش بیابد (شدت ماساژ متوسط). چراغ وسطی روشن می‌شود. دکمه را برای بار سوم فشار دهید تا باز هم درجه لرزش افزایش بیابد. (شدت ماساژ زیاد). چراغ سمت راست روشن می‌شود. فشردن دکمه برای بار چهارم لرزش را متوقف می‌کند و چراغ‌ها خاموش می‌شوند.

۸. حرارت (Heat)

عملکرد حرارتی می‌تواند در هر زمان با ماساژ شیاتسو فعال شود. دکمه heat را فشار دهید تا عملکرد حرارت فعال شود؛ چراغ روی کنترل از راه دور و سری‌های ماساژ روشن می‌شود. گرما از طریق سری‌های ماساژ متساع می‌شود. جهت غیرفعال کردن دوباره فشار دهید. چراغ روی کنترل و نور قرمز سری‌های ماساژ خاموش می‌شود.

عیب یابی

در این صفحه خلاصه‌ای از مشکلاتی که ممکن است هنگام کار با ماساژور با آن مواجه شوید آمده است. اگر نتوانستید با راه حل های گفته شده در زیر مشکل را بر طرف کنید، لطفاً با نمایندگی خدمات تماس بگیرید.

مشکل	دلایل ممکن	پیشنهاد
ماساژور کار نمی‌کند.	به درستی به برق متصل نشده است.	مطمئن شوید ولتاژ ماساژور مطابق ولتاژ اصلی محلی باشد و دوباره آن را به پریز متصل کنید.
	شاید ماساژور به تازگی دوره ۱۵ دقیقه‌ای ماساژ خودکار را تمام کرده و به طور خودکار به حالت standby رفته باشد.	اگر دوره دیگری می‌خواهید، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
	ممکن است از ماساژور در محلی که منبع حرارت بوده است به طور مداوم ۳۰ دقیقه یا بیشتر استفاده شده باشد.	دستگاه را از پریز بکشید و قبل از استفاده مجدد، به مدت ۶۰ دقیقه اجازه دهید سرد شود.
	بار اضافی روی ماساژور سوار شده است.	وزن اضافی را بردارید و دوباره امتحان کنید.
ماساژور به طور غیرمعمولی گرم است.	احتمال دارد بیش حد از آن استفاده شده باشد.	دستگاه را از برق بکشید و برای استفاده مجدد اجازه دهید خوب خنک شود.
صداهایی از آن به گوش می‌رسد.	قسمت‌های مکانیکی محصول صدا تولید می‌کنند.	این امر عادی است و به معنای نقصی در ماساژور نیست.

مراقبت و نگهداری

تمیز کردن

از سیم ظرفشویی، تمیزکننده‌های ساینده و مایعات خورنده (مانند گازوئیل، استون یا الکل) برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید.

۱. دو شاخه را از پریز بکشید.
۲. از پارچه‌ای خشک برای تمیز کردن دستگاه، کنترل از راه دور و سیم برق استفاده کنید.
۳. از پارچهٔ مرطوب یا مواد شوینده استفاده نکنید.

نگهداری

۱. دو شاخه را از پریز بکشید.
۲. ماساژور را در محلی خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری کنید.
۳. جسم سنگینی روی ماساژور قرار ندهید.

ویژگی های محصول

نام محصول	پشتی ماساژ شیاتسو
مدل	M12950
منبع برق	220-240 ولت AC
فرکانس	50-60 Hz
ولتاژ	12 ولت 2/5 آمپر
مصرف برق	60 وات
ابعاد محصول	710×425×180 (mm)
وزن خالص	5/3 KGs